



BladeCASSETTE

3 in 1 | Klingentferner



Schütze Dich -

Sichere Klingentfernung

▲ Vergessene Stich- und Schnittverletzungen

Die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Skalpell zu verletzen, ist 200 Mal höher als eine Stichverletzung durch Nadeln oder Kanülen. Besonders häufig sind Schnittverletzungen im chirurgischen Bereich. Leider wurde dieses Risiko bisher von vielen Anwendern, aber auch von der Verwaltung in Kliniken und Krankenhäusern erheblich unterschätzt.

Skalpellschnitte können jeden betreffen, egal wie erfahren Sie im Umgang mit Skalpellen sind. Stich- und Schnittverletzungen können Infektionen, durch Blut übertragene Krankheiten und nicht zuletzt psychische Belastung nach sich ziehen. Schwerere Schnitte erfordern möglicherweise einen mikrochirurgischen Eingriff, um verletzte Arterien, Nerven und Sehnen in den Fingern zu reparieren.

Viele Skalpellverletzungen lassen sich mit Qlicksmart BladeCASSETTE, dem weltweit zukunftsweisenden Klingentferner mit Einhandbedienung, mühelos vermeiden.



Keine Berührung



Keine Berührung



Keine Wiederummanteln




Keine Verletzung

▲ Der weltweit zukunftsweisende Klingentferner mit Einhandbedienung



Mit stabilem und kompaktem Design hat BladeCASSETTE genau die richtige Größe für den Sterilbereich.

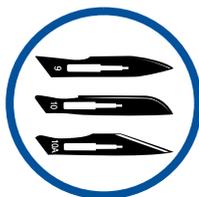

BladeCASSETTE kann bis zu 3 gebrauchte Skalpellklingen aufnehmen und schafft die Voraussetzungen für exakte Zählung und effiziente Entsorgung.



Mit BladeCASSETTE lassen sich gebrauchte Skalpellklingen mit schnellem „Drücken - Klick - Ziehen“ bequem entfernen und sicher aufbewahren.



Anwenderfreundliche Lösung als kostengünstige Alternative zu Sicherheitsskalpellen.



In Kombination mit handfreien Instrumentenübergabe kann BladeCASSETTE bis zu fünfmal mehr Verletzungen verhindern als ein Sicherheitsskalpell.



Mit BladeCASSETTE können Chirurgen auch weiterhin ihre bevorzugten Standardmetallgriffe verwenden.



Weltweit findet das kostensparende System mit einzigartiger Doppelfunktion, das sich einfach in Behandlungseinheiten integrieren lässt, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen sehr positiven Anklang.

Beschäftigte im Gesundheitswesen haben Anspruch auf Sicherheit am Arbeitsplatz – ein Anspruch, der alle Arbeitgeber verpflichtet.

Schaffen Sie mit Qlicksmart BladeCASSETTE mehr Sicherheit

Spezifikationen

Farbversionen	Rot - für USA Gelb - für alle anderen Länder	
Artikelnummer	QSSVCAS-3	
GMDN Code	46236	
Kapazität	3 Klingen – Jedes BladeCASSETTE-Set enthält 3 Einsteckhülsen, welche je eine Klinge fasst	
Kompatible Klingen & Griffe*	Griffe: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Baron, Lawton lange Griffe, zylindrische Griffe Klingen: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sabre D/15.	
Inkompatible Klingen; Griffe	Beaver Griffe, Einweggriffe	
Masse (pro Einheit)	Geschlossen: Länge 11cm Breite 5.7cm Dicke 0.9cm	Stehend: Länge 7.3cm Breite 5.7cm Höhe 10cm
Gewicht (pro Einheit)	< 50g	

Zubehör	k. A.
Material	Polypropylen (PP)
Latex	Nein
DEHP	Nein
Steril	Ja
Sterilisation	Gamma Bestrahlung oder ETO
Wiederverwendbar	Nein. Jede Einheit enthält drei Einstückhülse für je eine Klinge
Entsorgung	Nach Zählung der Klingen wird das gesamte BladeCASSETTE-Set als medizinischer Abfall in einem Behälter für spitze und scharfge Gegenstände entsorgt.
Zulassungen	Australien – Genehmigung TGA ARTG NO: 134623 USA – FDA-Zulassung Europa – Steriles Medizinprodukt der Klasse I – Richtlinie 93/42/EEC und CE-Kennzeichnung


* Qlicksmart BladeCASSETTE ist mit den meisten Marken kompatibel

Anwendung von BladeCASSETTE


BladeCASSETTE
3 in 1 | Klingentferner

VORBEREITUNG BEIDHÄNDIG:

1. Seitliche Griffprofile an der Kassete fassen und die Abdeckung ausrasten.

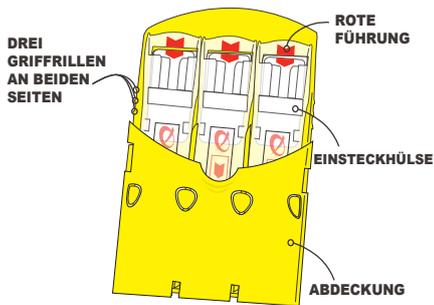


2. Abdeckung nach hinten umklappen und einrasten bis zum hörbaren „Klick“.
3. Auf Abdeckung platzieren.

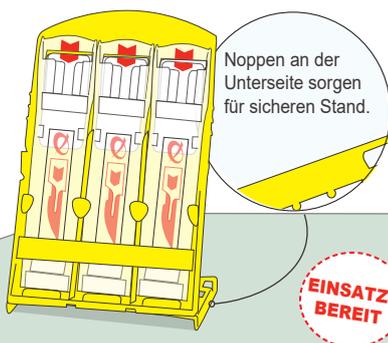

AKTIVIERUNG EINHÄNDIG:

4. Skalpellspitze einhändig in die Einsteckhülse schieben.

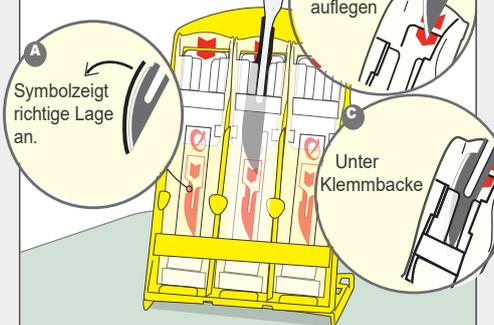

5. SENKRECHT ausrichten und dann das Skalpell nach unten drücken, bis ein Klicken zu hören ist.




SICHER FÜR BEIDE HÄNDE:

6. BladeCASSETTE mit der freien Hand halte und den Skalpellgriff herausziehen. pull out scalpel handle.



7. Bei Bedarf den Vorgang an anderen noch freien Einsteckhülsten wiederholen.
8. In der Hülse lassen sich die Klingen sicher zählen und später entsorgen.

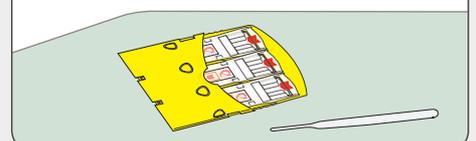

Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australien



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Vertrieb:

Bleiben Sie in Kontakt

