

BladeSINGLE

Rimozione di una lama

**L'estrattore di
lame con una
sola mano più
innovativo al
mondo**



www.qlicksmart.com

 **QLICKSMART®**
... and be safe


L'infortunio da tagliente

Le lesioni da bisturi hanno la probabilità di verificarsi 200 volte in più rispetto a quelle da ago. Sono particolarmente comuni negli ambienti chirurgici. Purtroppo, molti utenti e amministratori sottovalutano la probabilità di queste lesioni.

I tagli accidentali da bisturi possono accadere a chiunque, incluso te. Non importa quanta esperienza tu abbia nella gestione del bisturi. Questi incidenti possono creare gravi infezioni, causate dal contatto con sangue infetto. Alcune lesioni gravi possono richiedere un intervento di microchirurgia per riparare arterie, nervi e tendini.

Molte di queste lesioni possono essere facilmente prevenute utilizzando **Qlicksmart BladeSINGLE**, l'innovativo sistema per eliminare la lama del bisturi con una mano sola.

Sistema innovativo per la rimozione della lama del bisturi con una sola mano

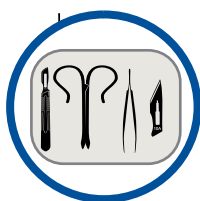

BladeSINGLE è perfetto per le procedure chirurgiche più piccole, rimuove un'unica lama chirurgica per un conteggio accurato e uno smaltimento sicuro.



BladeSINGLE è semplice da usare con una rapida azione "push, click, and pull" per rimuovere e contenere le lame del bisturi usate.



Questa soluzione facile da usare offre un'alternativa a basso costo ai bisturi di sicurezza.



Utilizzato insieme a una tecnica di passaggio a mani libere, BladeSINGLE può prevenire fino a 5 volte le lesioni rispetto ad un bisturi di sicurezza.



BladeSINGLE consente ai chirurghi di mantenere le loro preferenze per i manici metallici standard.



È già stato adottato dagli operatori sanitari di tutto il mondo per la sua unica doppia funzione, risparmio sui costi e facilità di inclusione nei pacchetti di procedure personalizzati.

La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto di tutti gli operatori sanitari e la responsabilità di tutti i datori di lavoro.

Utilizzare Qlicksmart BladeSINGLE ed essere al sicuro.




Codice prodotto	QSBS01
Codice GMDN	46236
Capacità della lama	1 lama - Ogni cartuccia BladeSINGLE rimuove 1 (una) Lama.
Compatibilità Manici e Lame*	Manici: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, barone, cilindrico Lame: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15 bis, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 36, 6, 9, E11, Sciabola D/15.
Incompatibilità manici e lame	Manici castoro, bisturi monouso
Dimensioni (per unità)	Chiuso: Lunghezza 9,3 cm Larghezza 2,2 cm Spessore 0,9 cm Aperto: Lunghezza 7,3 cm Larghezza 2,2 cm Altezza 9,3 cm
Peso (per unità)	< 30 gr

Materiale	Polipropilene
Latex	No
Dehp	No
Sterile	Sì, sì
Metodo di sterilizzazione	Raggi gamma o Eto
Riutilizzabile	No
Metodo di smaltimento	Dopo aver eseguito il conteggio delle lame BladeSINGLE va smaltito come rifiuto speciale.
Approvazioni normative	Australia - scheda sotto TGA ARTG NO: 134623 USA - FDA elencato Europa - Dispositivo medico sterile di classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio e CE


Istruzioni d'uso

PREPARARE USANDO DUE MANI:

1. Staccare il copri adesivo.

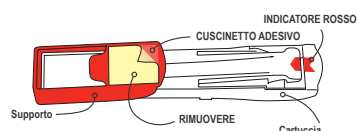

2. Estrai la cartuccia dal supporto.

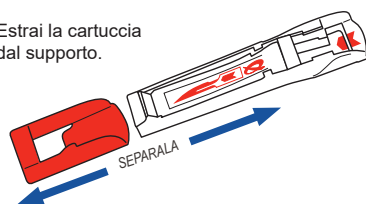

3. Fissare il supporto alla superficie.




4. Posizionare la cartuccia sul supporto.




ATTIVARE CON UNA SOLA MANO:


5. Utilizzando una mano, far scorrere la lama nella cartuccia.

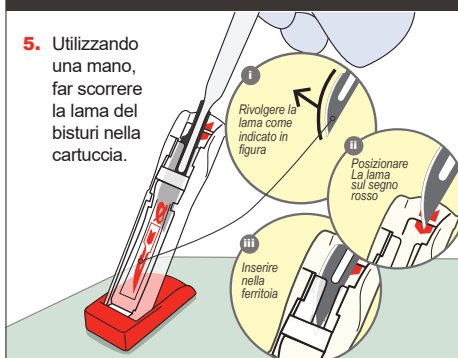

6. Inclina in posizione verticale e spingi verso il basso

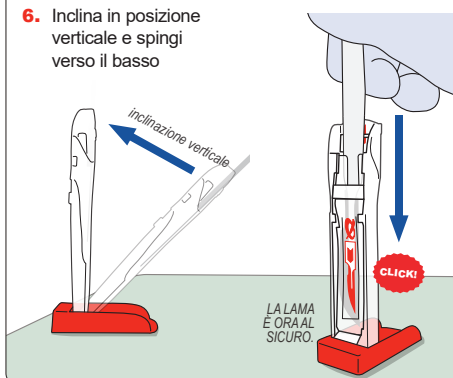


7. Rimuovere la cartuccia dal supporto.

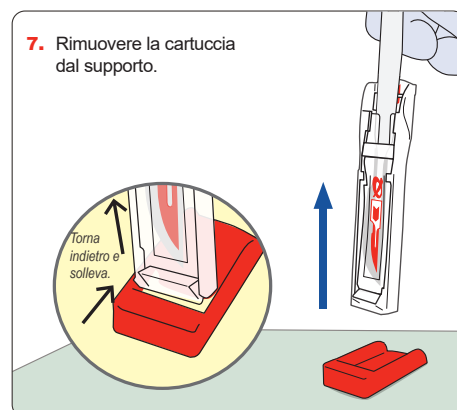

SICURO USARE DUE MANI:

8. Estrarre il manico del bisturi.

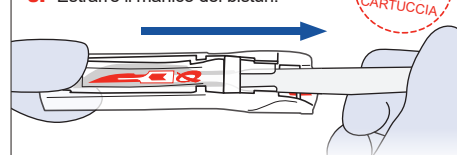

9. Pronto per il conteggio ed il successivo smaltimento.




Altri prodotti Qlicksmart

BladeFLASK Scalpel
Blade Remover




BladeCASSETTE Sterile
Scalpel Blade Remover

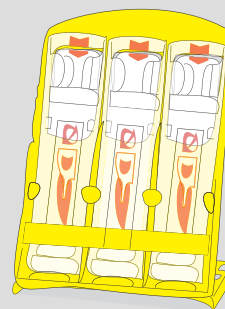

SnapIT and SnapIT Lite Ampoule Openers



BladeNeedleSYSTEM Sterile 2-in-1
Needle Counter + Blade Remover

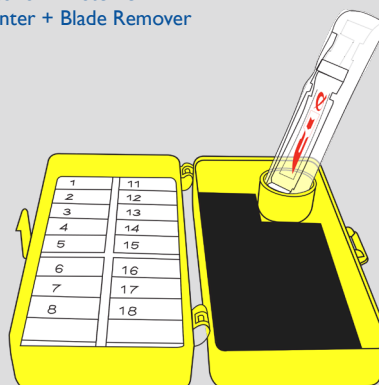

CheckCLIP Medication Identification



Informazioni su Qlicksmart

Qlicksmart Pty Ltd si impegna a rendere la vita degli operatori sanitari più facile e sicura, in modo che possano concentrarsi sull'assistenza ai pazienti. Fondata nel 1999 da due medici australiani per evitare i tagli accidentali da bisturi negli ospedali, i nostri pluripremiati dispositivi di sicurezza vengono attualmente utilizzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Qlicksmart collabora con specialisti del settore sanitario per fornire soluzioni che risolvano i problemi connessi al rischio di infortuni di infermieri, chirurghi e strutture sanitarie. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di sicurezza Qlicksmart, visita www.qlicksmart.com o chiedi al tuo distributore una dimostrazione oggi stesso.

Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com
www.qlicksmart.com



cerca "qlicksmart"
e rimanere connessi



Distribuito da: