

 **QLICKSMART®**

BladeFLASK

100 | Sistema de eliminación de cuchillas de bisturí



Trabaja seguro hoy,


Juega Seguro Mañana.

Las lesiones cortopunzantes olvidadas

Las lesiones por bisturí son 200 veces más probables que las lesiones por pinchazo de aguja. Son particularmente comunes en entornos quirúrgicos. Lamentablemente, muchos usuarios y administradores clínicos han subestimado la probabilidad de estas lesiones.

Los cortes de bisturí pueden ocurrirle a cualquier persona, incluso a usted, independientemente de la experiencia que tenga en el manejo de los escalpelos. Estos cortes pueden causar infecciones, enfermedades transmitidas por la sangre y trastornos psicológicos. Otras lesiones graves pueden requerir una microcirugía para reparar arterias, nervios y tendones digitales.

Muchas de estas lesiones por bisturí pueden prevenirse con **Qlicksmart BladeFLASK**, el removedor de cuchillas de una mano pionero en el mundo.

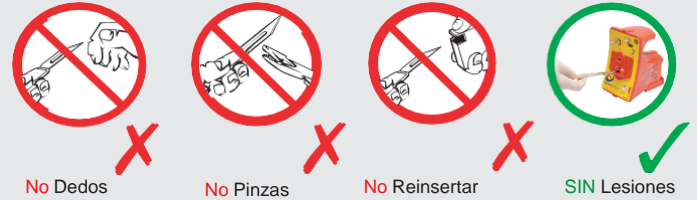

El premiado extractor de cuchillas



Qlicksmart BladeFLASK ha eliminado de manera segura más de 70 millones de hojas de bisturí contaminadas, y ha prevenido hasta 150,000 lesiones en todo el mundo.



BladeFLASK es fácil de usar con una acción rápida de "empujar, hacer clic y jalar" para eliminar y contener las hojas de bisturí usadas.



Esta solución fácil de usar ofrece una alternativa de menor costo a los escalpelos de seguridad.



Utilizado BladeFLASK junto con una técnica de pases manos libres, puede prevenir hasta 5 veces más lesiones que un bisturí de seguridad.



BladeFLASK permite a los cirujanos mantener sus preferencias para los mangos de metal estándar.



BladeFLASK ha sido galardonado, lo que demuestra su practicidad y eficacia en la reducción de las lesiones del bisturí.

La seguridad en el lugar de trabajo es un derecho de todos los trabajadores de la salud y la responsabilidad de todos los empleadores. Use el Qlicksmart BladeFLASK y manténgase seguro.

BladeFLASK

100 | Sistema de eliminación de cuchillas de bisturí

QLICKSMART®
... and be safe

■ Especificaciones

versiones de color	Rojo - para USA y México Amarillo - para todos los demás países
Código de Producto	QFRGEN – rojo QFYGEN - amarillo
GMDN código	46235
capacidad de la hoja	100 hojas: el BladeFLASK se cierra automáticamente cuando se alcanza la capacidad máxima.
Hojas y mangos compatibles*	Mangos: # 3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, asa larga de Lawton. Hojas: # 10, 10a, 11, 12, 13, etc. hasta e incluyendo # 25a, 27 y 36.
Hojas y mangos incompatibles	Mango Barón, Mango de castor, Mangos desechables
Tamaño (por unidad)	Largo 11cm, ancho 9cm, alto 14cm
Peso (por unidad)	Aproximadamente 250g
Accesorios	Soporte de montaje: el soporte sostiene el BladeFLASK en su lugar para permitir la extracción con una sola mano de las hojas del bisturí.



Material	Cuerpo: acrilnitrilo butadieno estireno (ABS) Mecanismo interno: poliacetal (POM)
Látex	No
DEHP	No
Estéril	No
Reusable	Uso múltiple: cada unidad elimina 100 cuchillas antes de desecharlas
Método de eliminación	El logotipo de la sustancia infecciosa en la etiqueta frontal y el color correcto del contenedor de objetos cortantes de la unidad permiten su eliminación como desecho médico. Por favor siga su procedimientos establecido para la eliminación de residuos médicos.
Aprobaciones regulatorias	Australia - Listado bajo TGA ARTG NO: 146821 EE.UU. - FDA 510 (K) previa a la comercialización aprobado # K983367 como un contenedor de objetos punzantes Europa: dispositivo médico de Clase I según la Directiva del Consejo 93/42 / CEE y el marcado CE

* Algunas marcas pueden no funcionar con Clicksmart BladeFLASK

▲ Como usar BladeFLASK

BladeFLASK

100 | Scalpel Blade Removal System

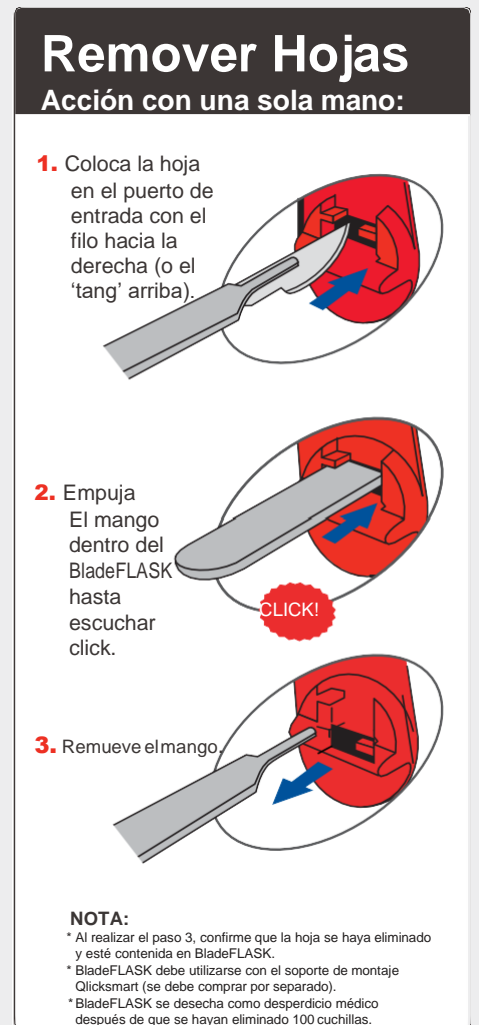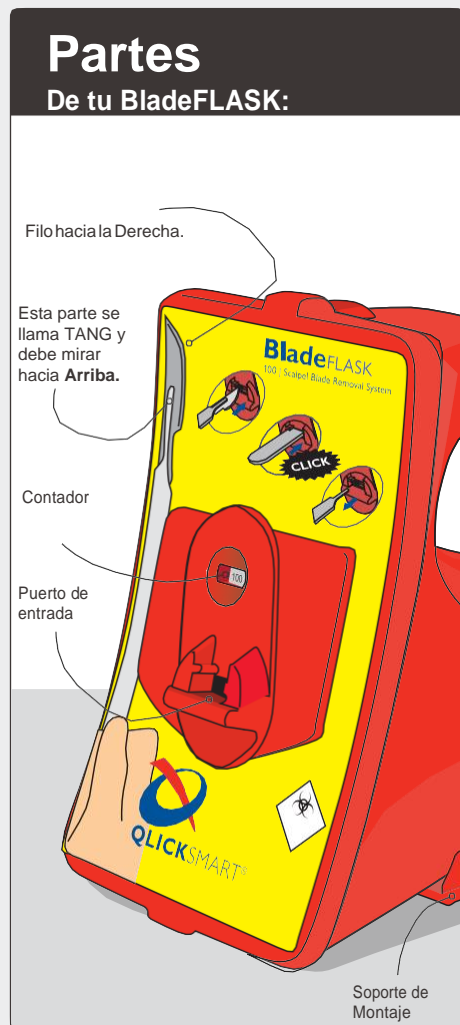

Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australia



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Stay Connected



Distribuido por:



MEDVIZ, S.A. de C.V.
Arizona No. 62, 2do.
Piso, Col. Nápoles,
Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P.
03810

Tel: 55 5590 1154 | 800
000 0090

eva@medviz.mx

